


# Transsett T-TALK™

## T-TALK - TEXTA DIN OMGIVNING

T-TALK ger förbättrade möjligheter att höra genom att samtal också textas. Med kompatibla hjälpmedel blir det lättare att uppfatta, förstå och minnas det som sägs vid exempelvis möten, telefonsamtal och videokonferens.

T-TALK fungerar som en virtuell hjälp och ger ökad trygghet i att höra i olika situationer. Det innebär helt enkelt fler möjligheter att hänga med i samtal oavsett grad av hörselnedsättning. Spara texten i din favoritapp så kan du gå tillbaka till vad som har sagts.

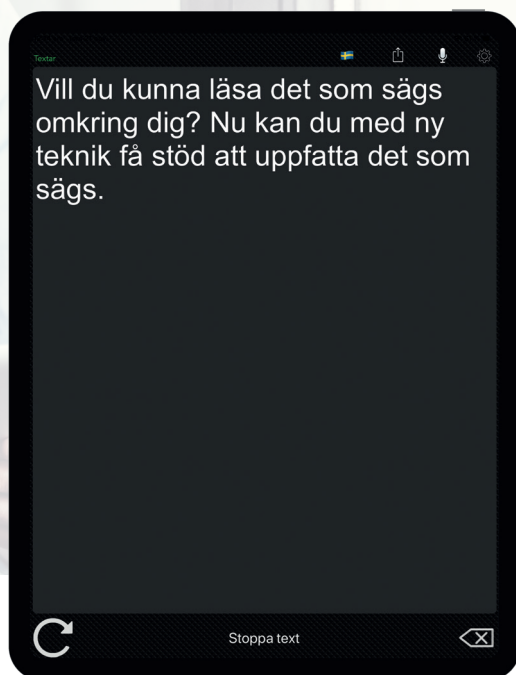

### En-till-en-kommunikation

Få dina samtal textade och minska risken för missförstånd.



### Föreläsning

Använd befintlig eller personlig hörselteknik för att höra och texta föreläsaren. Spara ner texten om det är viktigt för dig att kunna återkomma till vad som sagts.



### Möten och konferens

T-TALK kan texta tal från hörselslingan eller trådlösa mikrofoner som Phonak Roger.



### Telefonsamtal

Anslut din Phonak Roger Select/Roger Pen via Bluetooth till din mobiltelefon och få samtalet textat i din läsplatta.



### Videosamtal

Öka dina chanser att höra och bidra till mötet. Anslut till dator för både ljud och text i videosamtal. Stöd för anslutningar till olika typer av videokonferenslösningar.



Skanna koden för mer utförlig information om inkopplingsmöjligheter

Ladda ner T-TALK som en app\* eller beställ ett komplett system med färdigkonfigurerad läsplatta.




\*Licensnyckel erhålles av Transistor

## UNIKA FUNKTIONER OCH KOMPATIBEL MED HÖRTEKNIK

Med T-TALK går det att få flödande text i realtid eller att en eller några meningar i taget textas när någon pratar. Tack vare ett kvalitetsfilter får användaren feedback på om texten stämmer överens med det som sagts.

T-TALK kan användas tillsammans med viss annan hörteknik, till exempel konferensmikrofoner för möten. T-TALK laddas ner i en befintlig iOS-enhet eller beställs i en konfigurerad läsplatta som är klar att användas.

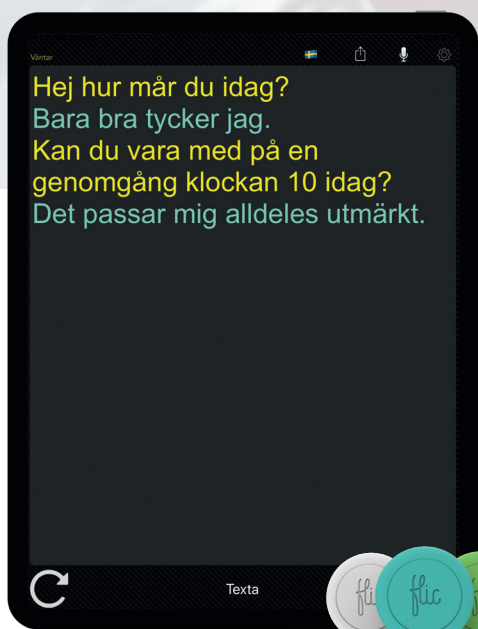

Ge dina kollegor färg med tryckknappar.

Mikrofoner som förbättrar den automatiska textningen.



### Teknisk Data

<b>Operativsystem:</b>	iOS 10 och högre
<b>Kompatibel hårdvara:</b>	iPad, iPhone och iPod Touch
<b>Datamängd vid textning:</b>	Upp till 120 Megabyte per textad timme
<b>Ordbok för textning:</b>	Möjlighet att lägga till egna ord och fraser
<b>Textflöde:</b>	Löpande text eller tryck och texta
<b>Textstyrning:</b>	Via kontroll i användargränssnitt eller via Flic blåtandsknapp
<b>Textfilter:</b>	Kvalitetsfilter för textning
<b>Möjlighet att spara text:</b>	Ja
<b>Textningsspråk:</b>	Svenska, Engelska, Danska, Norska, Finska, Polska, Tyska, Rumänska, Holländska
<b>Anslutning till mikrofoner:</b>	Ja, via blåtand eller AdapterG (Phonak Roger mikrofoner)
<b>Anslutning till hörslingor:</b>	Ja, via adapter R1
<b>Anslutning till telefon/videokonferens:</b>	Ja, via tillbehör

Du hittar alla våra lösningar för individer på [earstore.se](http://earstore.se)